

# SECTION 06

---

BANDS & PRE-WELD  
バンド & プリウエルド

---

Seamless Bands / Band Materials / Pre-Weld

# SEAMLESS BANDS

## IDEAL Molar Bands Right & Left

アイデアル大臼歯バンド/左・右

TOMYの35年に及ぶ臨床データにもとづくアイデアル モーラーバンドは、形態的に究められた高次元のデザインと高品質合金のスナップイン特性で歯牙へのフィット、安定性をお約束します。

## IDEAL | TOMY'S Revolutionary Molar Bands.

### Etched Interior

バンドの内壁はセメントの接着がより強く維持されるようエッチング処理が施されています。

### Hardened Occlusal Edge

咬合面エッジを堅く仕上げているからバンドシーターでエッジが歪むことなく歯牙にフィットできます。

### Flat Interproximal Walls

隣接面をフラットにすることにより適合性と保定効果が高められています。

### Permanent Marking

バンド試適の際や、薬液消毒でもバンドマークが消えることのない「レーザーマーキング」を採用しています。

### Malleable Middle Area

バンドの中央部は歯牙への適合性を向上させるため、伸張性のある軟らかい仕上げになっています。

### Thinner Gingival Edge

薄い肉厚のエッジは、より適合さを要求される歯肉部に対して的確にフィットします。



販売名：シームレスバンドA  
 一般的名称：歯列矯正用帯環  
 認証番号：21700BZZ00363000 管理医療機器

# SEAMLESS BANDS

## IDEAL Molar Bands Right & Left アイデアル大白歯バンド/左・右



アイデアルモラーバンドは左右の区別のある大白歯バンド。上顎用・下顎用それぞれNo.5～No.36まで32サイズ。ナンバーはバンド近心側にマークしてあります。

補充用バンドは1パック5個入です。サイズ、上下・左右、数量をご指示ください。

プリウェルド製品については、P.145をご参照ください。

シリーズ1大白歯バンドと番号(サイズ)の互換性はありません。

### アイデアルモラーバンドとシリーズ1大白歯バンドとの相違点

	アイデアル モラーバンド	シリーズ1 大白歯バンド
サイズ表記	19UL サイズ+部位	UL19 部位+サイズ

Molar Right & Left  
 大白歯 左・右

### 上顎用



	Upper 上顎 76   67	Lower 下顎 76   67	Quantity
トライアルキット 100 bands (R&L, Size No.5 ~ No.36)	313-00	314-00	100個/KIT ※左右のバンドが1つのケースに入っています。
スターターキット 200 bands (R&L, Size No.5 ~ No.36)	313-01	314-01	200個/KIT ※左右のバンドが2つのケースに入っています。
マスターキット 400 bands (R&L, Size No.5 ~ No.36)	313-02	314-02	400個/KIT ※左右のバンドが2つのケースに入っています。

### 下顎用



補充用バンド			
上顎 補充用バンド (R&L, Size No.5～No.36)	Left	361-05 ~ 36	5個/PK
	Right	362-05 ~ 36	
下顎 補充用バンド (R&L, Size No.5～No.36)	Left	363-05 ~ 36	5個/PK
	Right	364-05 ~ 36	

Band Kit Contains  
 バンドキット構成

バンドサイズ	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	左右合計
トライアル	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100個/KIT.
スターター	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	8	8	8	8	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	200個/KIT.
マスター	8	8	8	8	12	12	12	12	16	16	16	16	20	20	20	20	16	16	16	16	12	12	12	12	8	8	8	8	8	8	8	8	400個/KIT.

SEAMLESS  
BANDS販売名：シームレスバンドA  
一般的名称：歯列矯正用帯環  
認証番号：21700BZZ00363000 管理医療機器

## SERIES-1 Molar Bands Right &amp; Left

シリーズ1大臼歯バンド/左・右



シリーズ1大臼歯バンドは左右の区別のある大臼歯バンド。上顎用・下顎用それぞれNo.1～No.30まで30サイズ。ナンバーはバンド近心側にマークしてあります。

補充用バンドは1パック5個入です。ご注文の際には、サイズ、上下・左右、数量をご指示ください。

プリウェルド製品については、P.145をご参照ください。

アイデアルモラーバンドと番号(サイズ)の互換性はありません。

## シリーズ1大臼歯バンドとアイデアルモラーバンドとの相違点

	シリーズ1 大臼歯バンド	アイデアル モラーバンド
サイズ表記	UL19 部位 + サイズ	19UL サイズ + 部位

Molar Right & Left  
大臼歯 左・右

## 上顎用



## 下顎用



	Upper 上顎	Lower 下顎	Quantity
トライアルキット 100 bands (R&L, Size No.1 ~ No.30)	305-00	306-00	100個/KIT ※左右のバンドが1つのケースに入っています。
スターターキット 200 bands (R&L, Size No.1 ~ No.30)	305-01	306-01	200個/KIT ※左右のバンドが2つのケースに入っています。
マスターキット 400 bands (R&L, Size No.1 ~ No.30)	305-02	306-02	400個/KIT ※左右のバンドが2つのケースに入っています。

## 補充用バンド

上顎 補充用バンド (R&L, Size No.1～No.30)	Left	344-01 ~ 30	5個/PK
	Right	345-01 ~ 30	
下顎 補充用バンド (R&L, Size No.1～No.30)	Left	346-01 ~ 30	
	Right	347-01 ~ 30	

Band Kit Contains  
バンドキット構成

バンドサイズ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	左右合計
トライアル	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	100個/KIT.
スターター	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	6	6	4	4	4	200個/KIT.
マスター	8	8	8	8	8	8	8	12	12	12	16	16	16	16	16	20	20	20	20	20	16	16	16	16	16	12	12	8	8	8	400個/KIT.

販売名：シームレスバンドA  
 一般的名称：歯列矯正用帯環  
 認証番号：21700BZZ00363000 管理医療機器

# SEAMLESS BANDS

## 2nd Molar Bands Right & Left

第2大臼歯バンド/左・右

2nd Molar Right & Left  
 第2大臼歯 左・右

上顎用



上下顎第2大臼歯専用にデザインされたバンドです。上顎用・下顎用それぞれNo.1～No.30まで30サイズあります。ナンバーはバンド近心側にマークしてあります。

ご注文の際には、サイズ、上下・左右、数量をご指示ください。バンドキットはございません。

プリウエルド製品については、P.145をご参照ください。

アイデアルモラーバンドと番号(サイズ)の互換性はありません。

下顎用



### 補充用バンド

上顎 補充用バンド (R&L. Size No.1～No.30)	Left	354-01 ～ 30	5個/PK
	Right	355-01 ～ 30	
下顎 補充用バンド (R&L. Size No.1～No.30)	Left	356-01 ～ 30	
	Right	357-01 ～ 30	

SEAMLESS  
BANDS販売名：シームレスバンドA  
一般的名称：歯列矯正用帯環  
認証番号：21700BZZ00363000 管理医療機器

## Bicuspid Bands Upper, Lower 1st, Lower 2nd

小白歯バンド/上顎、下顎第1・下顎第2

Bicuspid  
小白歯

小白歯バンドは左右共通、上顎用はNo.1～No.32まで32サイズ、下顎第1小白歯用はNo.1～No.10まで10サイズ、下顎第2小白歯用はNo.11～No.32まで22サイズあります。

補充用バンドは1パック5個入です。ご注文の際には、サイズ、上下、数量をご指示ください。

プリウェルド製品については、P.145をご参照ください。

## 上顎用



## 下顎用



	Upper 上顎	Lower 下顎	Quantity
	5 4   4 5	第1小白歯 第2小白歯 4   4 5   5	
トライアルキット 100 bands UP. (Size No.1 ~ No.32) LO. (1st Lower Size No. 1 ~ No.10 2nd Lower Size No.11 ~ No.32)	303-00	304-30	100個/KIT
スターターキット 200 bands UP. (Size No.1 ~ No.32) LO. (1st Lower Size No. 1 ~ No.10 2nd Lower Size No.11 ~ No.32)	303-01	304-31	200個/KIT
マスターキット 400 bands UP. (Size No.1 ~ No.32) LO. (1st Lower Size No. 1 ~ No.10 2nd Lower Size No.11 ~ No.32)	303-02	304-32	400個/KIT

## 補充用バンド

上顎 補充用バンド (Size No.1～No.32)	340-01 ~ 32	5個/PK
下顎 補充用バンド (1st Lower Size No. 1 ~ No.10 2nd Lower Size No.11 ~ No.32)	1st Lo. 341-01 ~ 10 2nd Lo. 342-11 ~ 32	

Band Kit Contains  
バンドキット構成

バンドサイズ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	左右合計	
<b>Upper Bicuspid</b>																																		
トライアル	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	100個/KIT.
スターター	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10	10	10	8	8	8	6	6	6	4	4	4	4	200個/KIT.
マスター	8	8	8	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12	12	16	16	16	20	20	20	20	20	16	16	16	12	12	12	8	8	8	8	400個/KIT.	
<b>Lower Bicuspid</b>																																		
トライアル	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	(Lower 1st)																	100個/KIT.						
											(Lower 2nd)																	100個/KIT.						
スターター	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	(Lower 1st)																	200個/KIT.					
												(Lower 2nd)																	200個/KIT.					
マスター	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	12	(Lower 1st)																	400個/KIT.					
												(Lower 2nd)																	400個/KIT.					

販売名：バンドマテリアル  
 一般的名称：歯列矯正用帯環  
 認証番号：15200BZZ01356000 管理医療機器

# BAND MATERIALS

## Roll Band

バンド マテリアル ロール バンド

Roll Bands  
 ロールバンド



	厚さ×幅 (mm)		
Anterior 前歯用	0.08×3.2	321-01	2m/PK
Bicuspid 小臼歯用	0.10×3.8	321-04	
Molar 大臼歯用	0.10×4.6	321-06	
	0.13×4.6	321-07	

# BAND CASES

## Band Cases

バンド ケース

Band Cases  
 バンド ケース



※シルバーはブラケット用。(P.206参照)

701-16	ライトブラウン	Bicuspid	小臼歯用
701-17	ライトブルー	IDEAL Molar, Upper	アイデアル 上顎大臼歯用
701-18	パステルグリーン	IDEAL Molar, Lower	アイデアル 下顎大臼歯用
701-29	パステルピンク	Molar, Upper	シリーズ1 上顎大臼歯用
701-30	ライトイエロー	Molar, Lower	シリーズ1 下顎大臼歯用

## PRE-WELD

販売名：プリウェルド製品 A  
一般名称：歯列矯正用アタッチメント  
認証番号：222ADBZX00040000 管理医療機器

## プリウェルド

## プリウェルドとは？

あらかじめバンドにブラケット・チューブ類を溶接した製品をお届けするシステムです。

## 特別設計による専用ウェルダ―を使用

- 母材同士が完全に溶け合う強力溶接です。
- ナゲット(溶接痕)が殆ど見えない美しい溶接です。

## 精密溶接

- TOMYならではの精密溶接により、正確に溶接できます。



## プリウェルドの利点

- チェアタイムの短縮につながります。
- 正確なポジショニングが可能です。
- 強固な溶接のため脱落の心配がありません。

## プリウェルドご利用時のご注意

- ご注文の際はプリウェルド希望とお申し付けください。
- 特注品のため返品はお受けできません。
- ご注文の数量により、納期が前後する場合がございます。
- ご注文時以外のオーダー(以前にご購入いただいた製品)へのプリウェルドは行っていません。
- ご注文単位は、1サイズ5ケ入り/1PKを基準とし、各部位ごとに偶数単位でのご注文となります。(バッカルチューブの販売単位と同数)  
※下記ご注文例を参照して下さい。

## ご注文例

左上6番

361 - 17 + 361 - 18 & W9010 - 601 L  
5個 / 1PK 5個 / 1PK 10個 / 1PK

必ず同数になるようにご注文ください。

右上6番

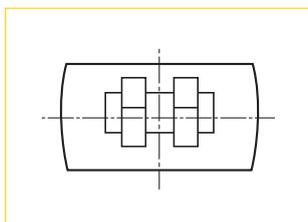
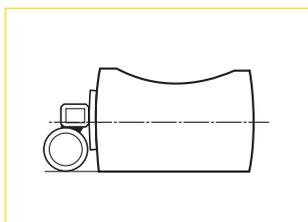
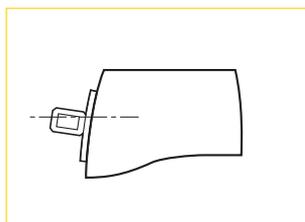
362 - 20 × 2 + 362 - 22 + 362 - 23 & W9010 - 601 R × 2  
10個 / 2PK 5個 / 1PK 5個 / 1PK 20個 / 2PK

必ず同数になるようにご注文ください。

## TOMY Standard Welding Position

## スタンダード ウェルディング ポジション

## EDGEWISE

Bicuspid  
小白歯Upper Molar  
上顎 大白歯Lower Molar  
下顎 大白歯