

SECTION 08

ELASTOMERIC PRODUCTS
エラストメリック関連製品

Elastics/Elastomerics

TRAVEL PACK ELASTICS



TOMYのトラベルパック エラスティックは、世界の国々をイラストで表現した楽しいパッケージで、各サイズがわかりやすく表示されています。精選された天然ラテックスを使用。寸法・精度が高く、プルバリューが正確です。

表示の牽引力はエラスティックの直径を3倍の長さに引っ張ったときの力を表し、サイズの数値はエラスティックの内径をmmで表しています。



Slack dia.	Rated Gram Pull (3×Slack dia.)	INTRAORAL				EXTRAORAL
		LIGHT 57gf (2.0oz.)	MEDIUM 85gf (3.0oz.)	HEAVY 113gf (4.0oz.)	SUPER HEAVY 170gf (6.0oz.)	顎外固定用
3 mm (1/8")	○	L3 Australia	M3 Germany	H3 India		
4 mm (5/32")	○	L4 Netherlands	M4 Mexico	H4 Switzerland		
5 mm (3/16")	○		M5 Russia	H5 Singapore	SH5 Brazil	
6 mm (1/4")	○	L6 China	M6 U.S.A.	H6 Japan	SH6 Thailand	XH6
8 mm (5/16")	○	L8 Canada	M8 Italy	H8 Sweden	SH8 Korea	XH8
10mm (3/8")	○	L10 England	M10 Spain	H10 France		XH10
12mm (1/2")	○					XH12
16 mm (5/8")	○	L16 Ireland				XH16
18 mm (11/16")	○					XH18

ELASTICS

販売名：エラスティックス
 一般的名称：歯列矯正用エラスティック器材
 認証番号：222ADBZX00035000 管理医療機器

Intraoral Elastics

口腔内用 エラスティック

Elastics (50 pouches/pk)
 50袋入 エラスティック



Size	Light	Medium	Heavy	Super Heavy	
3mm	L3 611-03	M3 621-03	H3 631-03		50袋/PK (1袋=100本)
4mm	L4 611-04	M4 621-04	H4 631-04		
5mm		M5 621-05	H5 631-05	SH5 631-85	
6mm	L6 611-06	M6 621-06	H6 631-06	SH6 631-86	
8mm	L8 611-08	M8 621-08	H8 631-08	SH8 631-88	
10mm	L10 611-10	M10 621-10	H10 631-10		
16mm	L16 611-16				

100本のエラスティックが入った小袋が50袋入っています。
 小袋はファスナー付の袋で劣化を防ぎます。

Extraoral Elastics


顎外固定用 エラスティック

Extra Heavy Elastics
 エキストラヘビー エラスティック



A (φ：直径)

6mm	XH6	642-06
8mm	XH8	642-08
10mm	XH10	642-10
12mm	XH12	642-12
16mm	XH16	642-16
18mm	XH18	642-18

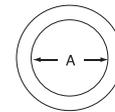


200本/
PK

販売名：ヘッドギア
 一般的名称：歯列矯正用ヘッドギア
 届出番号：13B2X10162590300 一般医療機器

ELASTIC AUXILIARIES

Pouches
 小分け用 ビニール袋

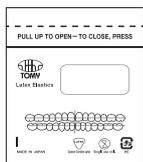

654-00

患者さんにエラスティックを小分けして渡す際に便利なビニール袋です。

200枚/
PK

Elastic Holder
 エラスティックホルダー



650-40

患者さんが口腔内でエラスティックを掛ける時、簡単にしかもスピーディーに行えるエラスティックホルダー。楽しいキャラクターをご用意してありますので、患者さんの協力も得られ、大変効果的です。

100個/
PK
(5種×20個)

Elastic Dispenser
 エラスティックディスペンサー



650-32

※エラスティックは入っていません。
 この商品は収納ケースのみです。

W405×H257×D81mm

TOMYエラスティックの大箱(50袋入)が5ケース収納でき、エラスティックの出し入れや保管、在庫管理をいっそう容易にします。


ELASTOMERICS

Elastic Modules

エラスティック モジュール

Super Chain
スーパー チェーン

持続力に優れた熱硬化性ポリウレタン製チェーンです。
ローフリクションシステムに適した種類もご用意いたしました。

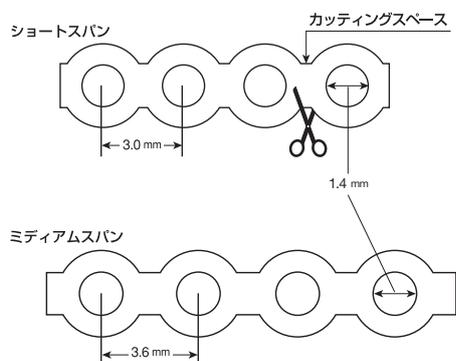

販売名：デンタルチェーン N
一般的名称：歯列矯正用エラスティック器材
認証番号：223ADBZX00008000 管理医療機器

主な特長

- 変色が少なく持続性に優れています。
- 厚さを5種類ご用意いたしました。症例に最適なフォースがご選びいただけます。
- チェーンを無駄なくご使用いただけるように、ショートスパンタイプにもカッティングスペースを確保しました。

	厚さ	ショート スパン	ミディアム スパン	
● ウルトラ ライトフォース	0.2mm	637-90	637-91	2m/巻
● エキストラ ライトフォース	0.3mm	637-00	637-01	
● ライトフォース	0.4mm	637-10	637-11	
● ミディアム フォース	0.5mm	637-20	637-21	
● ヘビーフォース	0.6mm	637-30	637-31	

Elastomeric Products

エラスティック製品

Bumper Strings
バンパー スtringス

1.5m 巻/2 個入

環状の断面をしたポリウレタン製チューブの粘膜保護材。
アーチワイヤーによる口腔内粘膜への刺激を緩和するために
ワイヤーを被覆します。



645-30 3m(1.5m/spoolx2)/PK

販売名：バンパーstringス
一般的名称：短期的使用歯科矯正用粘膜保護材
届出番号：13B2X10162591500 一般医療機器

内径
Inches(mm) .030(0.76)
外径
Inches(mm) .065(1.65)